

SMELL DISCETTES OLFACTION TEST

Mode d'emploi

Déclaration

Le mode d'emploi original est écrit en allemand et il est disponible traduit dans d'autres langues.

Il existe également une version plus complète avec une vidéo dans l'espace client du site web.

En complément des instructions courtes avec les trois pictogrammes au dos du couvercle du TestBox, des informations plus détaillées sont mises à disposition de l'utilisateur dans le mode d'emploi suivant.



- Ne pas mettre les disquettes dans la bouche
- Tenir les disquettes hors de portée des enfants
- Vérifiez si la personne à tester est allergique ou hypersensible à certains parfums.
- Traitez les disquettes inutilisables conformément au chapitre ci-dessous : « Renvoi – Recyclage – Élimination ».

1 Utilisation prévue

Le « Smell Discettes – Olfaction Test » (en abrégé : Smell-Test) sert au dépistage individuel d'un patient afin de déterminer si son odorat est normal.

2 Cadre d'utilisation et types de patients

Le Smell-Test est utilisé dans un cadre clinique (l'hôpital, le cabinet médical, la pharmacie), sur des adultes, et sur des enfants à partir de 6 ans. Le test nécessite la coopération du patient.

3 Contre-indications

Les disquettes contiennent des substances odorantes utilisées en quantités infimes, que l'on trouve également dans les cosmétiques ou les aliments quotidiens.

Bien qu'aucune complication ne nous ait été signalée à ce jour, il convient de demander aux patients, avant le test, s'ils présentent des allergies ou des intolérances à l'un des 8 parfums. En cas d'allergie à l'une des substances odorantes utilisées dans le Smell-Test, celui-ci ne doit pas être effectué.

4 Situations d'application

Son utilisation est recommandée dans les situations suivantes :

- Évaluation préopératoire de l'odorat avant une opération du nez et des sinus.
 - o Exclusion d'un trouble de l'odorat non détecté par le patient lui-même
 - o Documentation préopératoire
 - o Si nécessaire, documentation postopératoire
- Diagnostic présumé des troubles de l'odorat.
 - o Le Smell-Test permet de déterminer si l'odorat est normal
 - o Si le Smell-test révèle que l'odorat n'est pas normal, d'autres examens doivent être effectués, par exemple une mesure du seuil olfactif avec du N-butanol
- Examen d'une éventuelle altération de l'odorat en cas de maladies du nez et des sinus.
 - o rhinite aiguë (grippe, infection au coronavirus)
 - o rhinite allergique chronique (rhume des foins, allergie aux acariens)
 - o sinusite aiguë et chronique (polypose nasale)
- Troubles de l'odorat après un traumatisme crânien

- Maladies neurologiques
- Troubles de l'odorat après un contact avec des substances nocives présentes dans l'environnement

5 Gérer le Smell-Test Set

Avant d'utiliser le Smell-Test pour la première fois avec des patients, procurez-vous un SMELL Test-Set neuf et complet avec les 8 différentes disquettes, dans le TestBox. Toutes les informations pour se procurer un SMELL Test-Set sont disponibles sur la page « Produit » de notre site web. Le SMELL Test-Set est livré dans un emballage extérieur, le carton d'expédition.

Art-#	GTIN	Nom	Commentaires
SmellTest	7649988437519	Smell-Test Set	Le Smell-Test Set (unité de traitement), composé des 8 différentes disquettes et des documents, contenues dans le TestBox. Chaque disquette peut être remplacée individuellement.

6 Gestion des Smell-Test disquettes de rechange

Selon l'utilisation, c'est-à-dire la durée d'ouverture de chaque disquette, ils peuvent perdre leur odeur. Veillez à ce que chaque disquette soit bien fermée après son utilisation. Si vous percevez les premiers signes d'une perte d'odeur, procurez-vous des remplacements correspondants. Il est conseillé d'acheter un jeu complet de 8 disquettes de rechange, toutes différentes, afin de limiter les interruptions de test, notamment en cas de salissure imprévue. Toutes les informations pour se procurer des disquettes sont disponibles sur la page « Produit » du site web.

Sur chaque disquette, vous trouverez pour votre contrôle la date de fabrication : par ex. LOT 2025-09 (septembre de l'année 2025).

Les disquettes de remplacement pour le SMELL Test-Set sont livrées dans un emballage extérieur (sachet Gripp) et une pochette de protection.

Art-#	UDI-DI	Nom	Remarques
Disc#01	7649988437526	1	Disquette au parfum Café
Disc#02	7649988437533	2	Disquette au parfum Vanille
Disc#03	7649988437540	3	Disquette au parfum Pêche
Disc#04	7649988437557	4	Disquette au parfum Herbe
Disc#05	7649988437564	5	Disquette au parfum Ananas
Disc#06	7649988437571	6	Disquette au parfum Rose
Disc#07	7649988437588	7	Disquette au parfum Chocolat
Disc#08	7649988437595	8	Disquette au parfum Poisson

7 Réalisation du Smell-Test

Un Smell-Test prend environ 15 minutes, en tenant compte de la préparation et du suivi. Réalisé en ligne par un professionnel de santé formé avec un seul patient à la fois, il ne dure que quelques minutes. Les mesures d'hygiène généralement en vigueur dans l'environnement clinique doivent être respectées.

Les étapes séquentielles du Smell-Test sont accomplies en ligne. Le résultat est ensuite disponible sous forme de document pdf pour une utilisation ultérieure. Si vous préférez, vous trouverez également un formulaire papier à photocopier dans la TestBox. En plus le formulaire peut être téléchargé, dans l'espace client du site web.

7.1 Préparation du Smell-Test avant chaque contact avec le patient

Afin de préparer le Smell-Test pour un patient, il est recommandé d'essuyer avec précaution la TestBox et chaque disquette, sans l'ouvrir, avec un chiffon désinfectant à usage unique.

- Se laver et se désinfecter les mains avant le test afin de garder le matériel propre.
- Les disquettes défectueuses ou sans odeur ne doivent plus être utilisées : remplacez-les.
- Les disquettes doivent toujours être manipulées avec précaution, sans forcer, et ne doivent pas être portées à la bouche.
- Si un test unilatéral est souhaité, le patient doit fermer l'une des narines avec son doigt. Dans ce cas, la disquette est présentée au patient par le professionnel de santé.

7.2 Préparation du patient

Pour obtenir un résultat de Smell-Test fiable, il est fortement conseillé de ne pas fumer, manger ou boire dans les 15 minutes précédant le test.


- Se laver et se désinfecter les mains avant le test afin de garder le matériel propre.
- Les personnes fortement allergiques pourraient ne pas supporter certaines odeurs, ce qui doit être clarifié au préalable avec eux.
- Les disquettes doivent être manipulées avec précaution, sans forcer, et ne doivent pas être portées à la bouche.
- Si un test unilatéral est souhaité, une des narines peut être fermée avec le doigt.

7.3 Tester l'odorat d'un patient


Ouvrez notre site internet « www.smelldiscettes.com », Sélectionnez la langue de votre choix.

7.3.1 Accéder au test en ligne (OnlineTest)

Cliquez sur SmellTest dans le menu du site web et entrez vos données de connexion (examineur & clinique), puis le code, pour accéder à l'espace client.

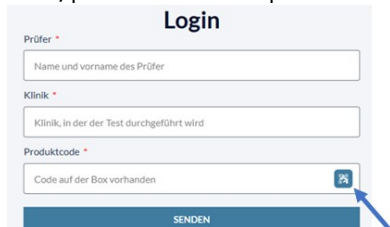

The login form is titled "Login". It contains three input fields: "Prüfer" (Name und vorname des Prüfer), "Klinik" (Klinik, in der der Test durchgeführt wird), and "Produktcode" (Code auf der Box vorhanden). A blue arrow points to a QR code icon next to the "Produktcode" field. Below the fields is a blue "SENDEN" button.

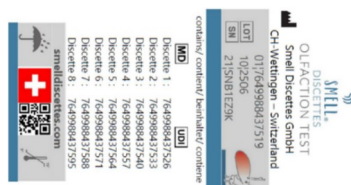

Pour cela, cliquez sur le symbole QR dans la dernière ligne de connexion pour scanner le code QR, qui se trouve à côté de la croix suisse, sur l'étiquette au dos de la TestBox ou entrez le numéro de série à 8 chiffres « 21 » (SN), au cas où votre équipement n'aurait pas de caméra.

Après avoir ouvert une session, vous accédez à la page web du client, qui contient des informations sur l'utilisation et le OnlineTest. Il est également possible d'utiliser des copies du formulaire papier, pour exécuter le Smell-Test exceptionnellement sans outils numériques.

7.3.2 La procédure de test

1. Le patient ouvre brièvement une disquette pour la renifler sans la toucher avec son nez.
2. Le professionnel de santé examine et nettoie cette disquette ouverte, puis la referme entre deux doigts comme indiqué sur l'image à droite et la remet dans la TestBox.
3. Le patient doit tout de suite choisir l'odeur qu'il a reconnue parmi trois illustrations (par exemple : café - tomate - banane). L'une des trois illustrations est très proche de l'odeur de disquette. Si le patient ne sent rien, il faut marquer la réponse qui lui convient le plus.
4. Si une disquette a été contaminée par des sécrétions nasales ou autres substances, elle doit être remplacée.
5. Le OnlineTest fournit immédiatement le résultat sous forme de document pdf imprimable. Le professionnel chargé de la surveillance peut également évaluer le formulaire papier personnalisé immédiatement après la fin du test. Voir à ce sujet la section « pré-évaluation du test » ci-dessous.
6. Le médecin discute le résultat avec le patient. Pour évaluer précisément l'étendue d'un éventuel trouble olfactif, il est nécessaire de recourir à des méthodes plus approfondies, par exemple la mesure du seuil olfactif avec du n-Butanol.



7.4 Évaluation du Smell-Test

La conclusion/l'évaluation du Smell-Test est généralement effectuée par un professionnel de la santé formé, en présence du patient. Le calcul du résultat du Smell-Test s'effectue de la même manière sur le formulaire papier et sur le formulaire en ligne.

Un point est attribué par bonne réponse. Le résultat se situe donc entre 0 et 8 points.

Les réponses correctes sont :

#1 Café – #2 Vanille – #3 Pêche – #4 Herbe – #5 Ananas – #6 Rose – #7 Chocolat – #8 Poisson

Interprétation du résultat du Smell-Test

- 7 à 8 points : Capacité olfactive normale
- 0–6 points : Il est très probable qu'il s'agisse d'un trouble de l'odorat (hyposmie, anosmie). Il est également possible que le patient testé manque de coopération.

7.5 Smell-Test Nettoyage final

Afin de réduire la propagation des germes et des infections et de contribuer ainsi au maintien général d'un environnement hygiénique, le SMELL Test-Set doit être intégré dans le plan d'hygiène de la clinique.

Chaque disquette et la TestBox doivent être essuyées avec un chiffon humide désinfectant à usage unique après chaque utilisation.

Le SMELL Test-Set avec ses disquettes est un produit non critique selon la norme ISO 17664 :2016-06, annexe C, et ne convient pas à un processus de nettoyage automatisé : comme de nombreux stéthoscopes, par exemple.

7.6 Smell-Test Thérapie - évaluation

Si le « Smell Discettes Olfaction Test » relève l'éventuelle présence d'un trouble olfactif, un examen plus approfondi peut s'avérer nécessaire. Lors d'une telle étape supplémentaire, il est par exemple possible de déterminer l'ampleur du trouble olfactif ou le seuil olfactif à l'aide d'un Test de seuil au n-butanol, ce qui ne fait pas partie du Smell-Test.

8 Durée de vie, stockage et remplacement

La durée de conservation recommandée du SMELL Test-Set est en principe de 6 mois, notamment pour des raisons d'hygiène. Toutefois, si le Smell-Test est utilisé rarement, c'est-à-dire bien moins de 500 fois, un résultat de Smell-Test fiable peut être obtenu au-delà de six mois.

Un peu avant d'atteindre les 500 utilisations, le OnlineTest signale un besoin de remplacement.

Mais au bout d'une année au plus tard, il faut le remplacer définitivement et complètement, indépendamment du nombre d'utilisations.

Il est conseillé de commander un remplacement à temps afin de garantir la continuité des tests sans interruption.

Un SMELL Test-Set complet doit être conservé dans un endroit au frais et sec ; il est recommandé de le placer au réfrigérateur, à une température comprise entre +2 °C et +15°C. Cela permet de prolonger quelque peu la durée de vie, même si de nombreux Smell-Tests sont effectués avec des patients.

9 Renvoi – Recyclage – Élimination

À la fin de sa durée de vie et après un nettoyage final, un SMELL Test-Set doit être renvoyé soit au revendeur, soit directement au fabricant. Cela permet de séparer les disquettes afin de recycler le plastique. Vous pouvez, pour ce faire, réutiliser l'emballage d'origine. À défaut, les disquettes peuvent être éliminées via l'usine d'incinération des déchets municipaux, mais ne doivent en aucun cas être déposées dans le recyclage des plastiques. En revanche, les papiers et cartons peuvent être recyclés directement par vos soins si vous ne souhaitez pas les renvoyer.