

SMELL DISCETTES OLFACTION TEST

Gebrauchsanweisung

Erklärung

Die Gebrauchsanweisung ist original in Deutsch und liegt in weiteren Sprachen als Übersetzung vor. Man beachte zudem eine umfassendere Version mit Video im Kundenbereich der Website.

In Ergänzung zur Kurzinstruktion mit drei Piktogrammen, auf der TestBox Deckel Rückseite, werden dem interessierten Anwender, in folgender Gebrauchsanweisung detaillierte Informationen bereitgestellt.



- Die Disketten dürfen nicht in den Mund genommen werden
- Die Disketten sollen von Kindern ferngehalten werden
- Klären Sie ab, ob die zu testende Person allergisch oder überempfindlich auf gewisse Düfte ist
- Behandeln Sie unbrauchbare Disketten gemäss Kapitel «Rücksenden – Wiederverwerten – Entsorgen» unten

1 Verwendungszweck

Der „Smell Discettes – Olfaction Test“ (abgekürzt: Smell-Test) dient zum patientenindividuellen Screening, ob ein normaler Riachsin vorliegt.

2 Patientengruppen und Einsatzort

Der Smell-Test ist im klinischen Umfeld (Spital, Arztpraxis, Apotheke), an Erwachsenen, und Kindern ab 6 Jahren einsetzbar. Der Test erfordert die Mitarbeit des Patienten.

3 Kontra-Indikationen

In den Disketten werden Duftstoffe in minimalen Mengen verwendet, die alltäglich auch in Kosmetika oder Lebensmitteln vorkommen. Obschon uns bis heute keine Komplikationen bekannt sind, sollten Patienten vor dem Test befragt werden, ob bei ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten gegen einen der 8 Düfte vorliegen. Bei einer Allergie, gegen einen der im Test eingesetzten Düfte, darf der Test nicht durchgeführt werden.

4 Anwendungssituationen

Die Anwendung ist in folgenden Situationen indiziert:

- Präoperative Evaluation des Riachsinnes vor Operationen in der Nase und an den Nasennebenhöhlen:
 - o Ausschluss einer vom Patienten selbst nicht bemerkten Riachstörung
 - o Präoperative Dokumentation
 - o Bei Bedarf auch postoperative Dokumentation
- Abklärung von Riachstörungen.
 - o Der Smell-Test kann feststellen, ob ein normaler Riachsin vorliegt, Wenn der Smell-Test ergibt, dass kein normales Riachvermögen vorliegt, müssen weitere Abklärungen erfolgen, beispielsweise eine Messung der Riachschwelle mit N-Butanol
- Abklärung einer allfälligen Beeinträchtigung des Riachsinnes bei Erkrankungen der Nase und der Nasennebenhöhlen:
 - o akute Rhinitis (Grippe, Corona-Infekt)
 - o chronische allergische Rhinitis (Heuschnupfen, Hausstaubmilbenallergie)
 - o akute und chronische Sinusitis (Polyposis Nasi)
- Riachstörung nach Kopf/Schädel-Trauma
- Neurologische Erkrankungen
- Riachstörung nach Kontakt mit Umwelttoxnen

5 Smell-Test Set verwalten

Bevor Sie den Smell-Test zum ersten Mal mit Patienten einsetzen, besorgen sie sich ein-vollständiges, neues SMELL Test-Set mit den 8 verschiedenen Disketten, in seiner TestBox. Unsere Website unterstützt Sie beim Bestellen des SMELL Test-Set auf der Seite «Produkt».

Das SMELL Test-Set, wird in einer Umverpackung, dem Versandkarton geliefert.

Art-#	GTIN	Name	Bemerkungen
SmellTest	7649988437519	Smell Test-Set	Das SMELL Test-Set (Behandlungseinheit), bestehend aus den 8 verschiedenen Disketten und Dokumenten, welche in der TestBox enthalten sind. Jede Diskette kann einzeln ersetzt werden.

6 Smell-Test Ersatz Disketten verwalten

Je nach Nutzung, das heisst der Öffnungsdauer jeder einzelnen Diskette, können diese ihren Duft verlieren. Achten Sie darauf, dass jede Diskette, nach ihrem Gebrauch gut geschlossen ist. Wenn Sie erste Anzeichen von nachlassendem Duft wahrnehmen, besorgen Sie sich die entsprechende(n) Ersatz. Sinnvoll kann ein kompletter Satz aller 8 Ersatz-Discettes sein, um ein Ausfallrisiko des Testes, auch z.B. bei plötzlicher starker Verschmutzung, zu reduzieren. Unsere Website unterstützt Sie beim Bestellen von ErsatzDiscettes auf der Seite «Produkt».

Auf jeder Diskette finden Sie zu Ihrer Kontrolle, das Herstellungsdatum: z.B. LOT 2025-09 (September im Jahre 2025).

Die ErsatzDiscettes zum SMELL Test-Set, werden in einer Umverpackung (Gripp-Beutel) und Versandtasche geliefert.

Art-#	UDI-DI	Bezeichnung	Bemerkungen
Disc#01	7649988437526	1	Diskette mit Duft Kaffee
Disc#02	7649988437533	2	Diskette mit Duft Vanille
Disc#03	7649988437540	3	Diskette mit Duft Pfirsich
Disc#04	7649988437557	4	Diskette mit Duft Gras
Disc#05	7649988437564	5	Diskette mit Duft Ananas
Disc#06	7649988437571	6	Diskette mit Duft Rose
Disc#07	7649988437588	7	Diskette mit Duft Schokolade
Disc#08	7649988437595	8	Diskette mit Duft Fisch

7 Smell-Test Durchführung

Inklusive Vor- und Nachbereitung dauert ein Smell-Test rund 15 Minuten. Von einer geschulten medizinischen Fachperson, mit einem einzigen Patienten online durchgeführt, dauert er wenige Minuten. Dabei sind die im klinischen Umfeld generell geltenden Hygienemassnahmen zu beachten.

Die sequenziellen Testschritte, werden on-line abgearbeitet. Das Resultat liegt zum Schluss als pdf-Dokument zur weiteren Nutzung vor. Wenn bevorzugt, ist auch ein Papierformular zum Kopieren in der Testbox. Weitere Formulare können im Kundenbereich der Website heruntergeladen werden.

7.1 Smell-Test Vorbereitung vor jedem Patientenkontakt

Um den Smell-Test für einen Patienten vorzubereiten, empfiehlt es sich, die TestBox und jede Diskette rundum, ohne zu öffnen, vorsichtig mit einem Einweg-Desinfektionstuch abzuwischen.

- Hände vor dem Testen waschen und desinfizieren, um das Material sauber zu halten.
- Defekte Disketten oder solche ohne typischen Geruch, dürfen nicht mehr verwendet werden: ersetzen.
- Disketten sind immer vorsichtig, ohne Gewaltanwendung zu behandeln und dürfen nicht in den Mund genommen werden.
- Wird ein einseitiger Test gewünscht, soll der Patient die eine Nasenöffnung mit seinem Finger verschliessen. In diesem Fall wird die Diskette von der Fachkraft dem Patienten präsentiert.

7.2 Vorbereitung des Patienten

Um ein zuverlässiges Testresultat zu erhalten, ist es notwendig, 15 Minuten vor dem Testen weder zu rauchen noch zu essen oder zu trinken.

- Hände vor dem Testen waschen und desinfizieren, um das Material sauber zu halten.
- Starke Allergiker könnten einzelne Gerüche nicht vertragen, was vorgängig mit ihnen zu klären ist.
- Disketten sind vorsichtig, ohne Gewaltanwendung zu behandeln und dürfen nicht in den Mund genommen werden.

- Wird ein einseitiger Test gewünscht, kann die eine Nasenöffnung mit dem Finger verschlossen werden.


7.3 Riechvermögen mit einem Patienten testen

Öffnen Sie die öffentliche Website des Produkts „www.smelldiscettes.com“, durch Web-Suche oder Scannen des QR-Codes auf der Rückseite des TestBox-Deckels.

Wählen Sie Ihre Sprache.

7.3.1 Zugang zum OnlineTest

Klicken Sie im Menü der Website auf SmellTest und geben Sie Ihre Anmeldedaten (Prüfer & Klinik), anschliessend den Code ein, um in den Kundenbereich der Website zu gelangen.

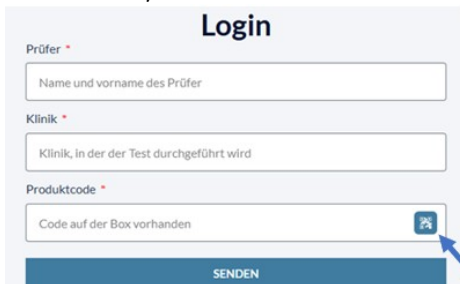

Login

Prüfer *

Name und vorname des Prüfers

Klinik *

Klinik, in der der Test durchgeführt wird

Produktcode *

Code auf der Box vorhanden

SENDEN



smelldiscettes.com

Discette 1: 7649988437526
Discette 2: 7649988437533
Discette 3: 7649988437540
Discette 4: 7649988437557
Discette 5: 7649988437564
Discette 6: 7649988437571
Discette 7: 7649988437588
Discette 8: 7649988437595



Klicken Sie dazu auf das QR-Symbol in der letzten Login-Zeile, um den QR-Code neben dem Schweizerkreuz (Beispiel oben), auf dem Etikett der TestBox-Rückseite zu scannen oder geben Sie die 8-stellige Seriennummer (SN), beginnend mit «21», ein, falls Ihr Gerät keine Kamera hat.

Nach dem Einloggen werden Sie auf die Kundenwebseite weitergeleitet, welche Informationen zur Nutzung und den Online-Test enthält. Es ist auch möglich, Kopien des Papierformulars zu verwenden und so den Smell-Test ausnahmsweise ohne digitale Hilfsmittel zu nutzen.

7.3.2 Das Vorgehen beim Testen

1. Eine Diskette wird vom Patienten kurz geöffnet, um daran zu riechen, ohne dass die Diskette die Nase berührt.
2. Die überwachende Fachkraft prüft und reinigt diese Diskette offen, um sie dann mit zwei Fingern, wie auf dem Bild rechts zusammenzustossen und auf diese Art gut verschlossen in die TestBox zurückzulegen.
3. Der Patient muss den erkannten Geruch, sofort aus einer Auswahl von drei Illustrationen, (zum Beispiel: Kaffee – Tomate – Banane) auswählen: Jeweils eine der drei Illustrationen, kommt dem Geruch der Diskette sehr nahe.
Wenn der Patient nichts riecht, ist die wahrscheinlichste Antwort zu markieren.
4. Der Zyklus: Öffnen, Riechen, Schliessen und jeweils antworten, wird mit allen 8 Disketten wiederholt. Die Reihenfolge spielt keine Rolle; empfohlen ist jedoch mit #1 zu beginnen und mit Diskette #8 zu enden. Wenn eine Diskette mit Nasensekret oder anderweitig verunreinigt wurde, soll sie ersetzt werden.
5. Der OnlineTest liefert das Resultat sofort als weiterverwendbares pdf-Dokument. Die überwachende Fachkraft, kann alternativ, das personalisierte Papierformular, nach dem Testende, sofort auswerten. Beachten Sie dazu den Abschnitt «Testauswertung» unten.
6. Der Arzt bespricht das Ergebnis mit dem Patienten.
Zur Bestimmung des Ausmasses einer möglicherweise festgestellten Riechsinnstörung, sind weiterführende Testmethoden (z.B. Bestimmung der Riechschwelle mit n-Butanol) notwendig.



7.4 Smell-Test Auswertung

Test-Abschluss und -Auswertung erfolgen üblicherweise durch eine geschulte medizinische Fachperson im Beisein des Patienten. Sowohl im Papier- als auch im Online-Formular, erfolgt die Berechnung des Testresultates gleichermassen. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Resultat liegt somit zwischen 0 und 8 Punkten.

Die richtigen Antworten sind:

#1 Kaffee – #2 Vanille – #3 Pfirsich – #4 Gras – #5 Ananas – #6 Rose – #7 Schokolade – #8 Fisch

Interpretation des Testresultates

- 7–8 Punkte: Normales Riechvermögen

- 0–6 Punkte: Es liegt sehr wahrscheinlich eine Störung des Riechsinn vor (Hyposmie, Anosmie). Möglich ist auch eine mangelnde Kooperation der Testperson

7.5 Smell-Test Schlussreinigung

Um die Verbreitung von Keimen und Infektionen zu reduzieren und damit zur allgemeinen Aufrechterhaltung einer hygienischen Umgebung beizutragen, soll das Smell-Test Set in den Hygieneplan der Klinik aufgenommen werden. Jede Diskette und die TestBox, soll dabei nach einer Verwendung, mit einem feuchten Einweg Desinfektionstuch abgewischt werden.

Das SMELL Test-Set mit seinen Disketten ist ein nicht kritisches Produkt gemäss ISO 17664:2016-06, Anhang C und für ein automatisiertes Reinigungsverfahren ungeeignet: ähnlich wie z.B. viele Stethoskope.

7.6 Smell-Test Therapie-Evaluation

Wird mit dem «SMELL Discettes Olfaction Test» das Vorliegen einer möglichen Riechstörung erkannt, ist gegebenenfalls eine weitergehende Abklärung notwendig. Bei einem solch zusätzlichen Schritt kann die Riechschwelle beispielsweise mit einem n-Butanol Schwellentest evaluiert werden, was nicht Bestandteil dieses Testes ist.

8 Haltbarkeit, Aufbewahrung und Ersatz

Die empfohlene Haltbarkeit des SMELL Test-Set ist grundsätzlich 6 Monate, dies insbesondere auch aus hygienischen Gründen. Wenn der Test jedoch selten, das heisst weit unter 500-mal genutzt wird, kann über das halbe Jahr hinaus ein zuverlässiges Testergebnis erzielt werden.

Etwas vor dem Erreichen von 500 Anwendungen wird im Online-Test ein Ersatzbedarf signalisiert. Spätestens nach einem Jahr ist der Smell-Test aber, unabhängig von der Anzahl der Anwendungen, definitiv und komplett zu ersetzen. Es ist empfohlen, rechtzeitig Ersatz zu bestellen, damit ununterbrochenes Testen gewährleistet ist.

Ein SMELL Test-Set mit seinen gut verschlossen Disketten, soll kühl und trocken, aufbewahrt werden; praktischerweise im Kühlschrank zwischen +2 und +15°C. So kann sich die Lebensdauer etwas verlängern, auch wenn viele Tests mit Patienten durchgeführt werden.

9 Rücksenden – Wiederverwerten - Entsorgen

Ein SMELL Test-Set soll nach seiner Lebenszeit und der Schlussreinigung, zum Händler oder direkt zum Hersteller zurückgesandt werden. Dies ermöglicht ein Trennen der Disketten zum Wiederverwerten des Kunststoffes. Dazu sollen dieselben Versandverpackungen, wie bei der Anlieferung, verwendet werden. Alternativ können die Disketten der Kehrichtverbrennung, jedoch nicht der Kunststoff-Wiederverwertung, zugeführt werden.

Testbestandteile aus Papier und Karton, dürfen Sie dagegen selbst, dem Recycling zuführen, wenn Sie diese nicht zurücksenden wollen.